

ヴィゾルクデジタルXL FHD
29cm

2倍 ~ 22倍



スマホと同じ
タッチパネル

1655-1 ¥198,000 (非課税)
JAN 4026158-595119

大画面なのにわずか 1kg の軽量設計
人前でも臆せず使えるスタイリッシュ読書器

NEW 専用ベース
1655-105 ¥11,000 (¥10,000) 本体価格
JAN 4048347-967798

- タッチパネルでかんたん操作
- まぶしさ軽減ディスプレイ採用。画面が明るくコントラストが強いため見やすく、読むことに集中できます
- HD 高感度カメラで拡大時の違和感を軽減
- 縦横双方向へのスクロール機能で拡大時の文字の見失いを防ぎます
- アンダーライン、必要な部分のみを表示するマスキング機能でさらに読みやすく
- 人間光学に基づいたスタンド設計で首・肩・腰への負担を軽減します
- カメラが上下に可動し距離が取れるので読むだけでなく書き込みもらくらく
- 取扱説明書が本体にインストール済み、いつでも確認できます



書き込みやすく文庫本も読みやすい専用ベース (別売)

タッチ操作で直観的な使い心地

スマートフォンの画面のように二本の指で拡大縮小、スクロールが可能です

まぶしさを抑えたクリアディスプレイ+マットブラック表示で読みやすい

裏表のないUSBなので差し込みが簡単

左右のダイレクトボタンで縦横双方向へのスクロールが簡単に




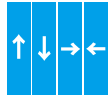
軽量かつ大画面ディスプレイ、据置き型として見やすく、持ち運びもらくらく

腰や肩が楽な姿勢で使え、書き込みや文庫本などが読みやすい専用ベース




専用ベースが新登場

簡易操作方法

- MENU** 上部ボタン：様々な設定ができます
-  撮影が可能。撮影した状態で倍率の変更や色の反転、画像保存ができます
-  無段階ズームで倍率の変更ができます
-  セットしたコントラストパターンの切替ができます
-  3倍以上に拡大した画面を上下左右にスクロールします

日常生活用具助成制度

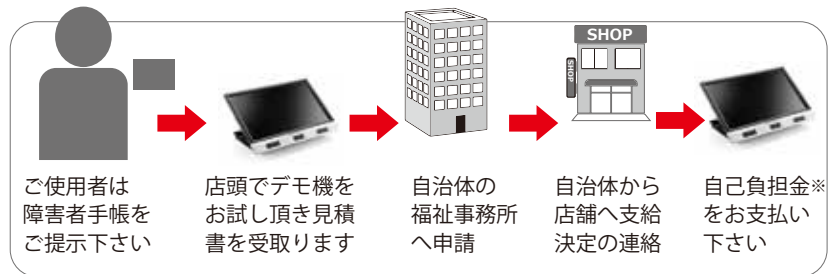

※自己負担金はない場合もございます

安心のお約束

- 日本語の取扱い説明書を同封
- 修理などアフターケアは日本支社が対応いたします
- ロービジョン専用相談窓口（ルーペの使い方などをご説明します）

TEL 03-3293-8570（平日 11:00 ~ 16:00）

スペック

画面：11.6インチフルHDタッチスクリーン
倍率：2倍～22倍
モード切替え：フルカラー、14種のカラー
コントラストモード
明るさ調整：3段階
充電時間：約4.5時間
連続使用時間：約2.5時間
USBポート：タイプC
サイズ：290×200×40mm
重さ：約1050g
付属：ケース、ACアダプター、ストラップ、
HDMIケーブル、USBケーブル、SD
カード、マイクロファイバークロス

お問い合わせ